

小さく支える大きな未来 ーミライズー



立つ・座る・移動する

安全サポート

木製置くだけ手すり

スゴカン

ウッドシリーズ

ニーズに応じた5タイプ

設置工事不要

※置くだけですぐに使用可能
穴を開けずに設置可能

&

**木製で
温かい手触り**



フローリング廊下型



ベッド差し込み型



トイレ型



床立ち上がり型




畳置き型

どこでも置くだけ！不意な転倒事故を防止します。


長年、介護現場を直接見て考案した「置くだけ手すり」一回の転倒事故で穏やかだった日常が変わってしまうそんな悲劇を減らしたい！その想いで設計しました。

工事不要ですぐに使える"置くだけ手すり"

トイレでの
立ち座り

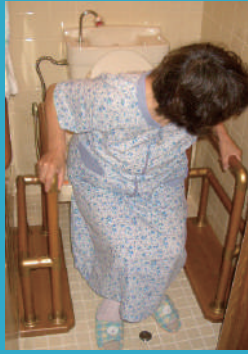

ベッドからの
立ち上がり

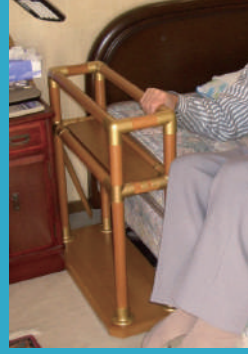


床からの
立ち上がり



畳置きでの
移動補助



廊下での
移動補助

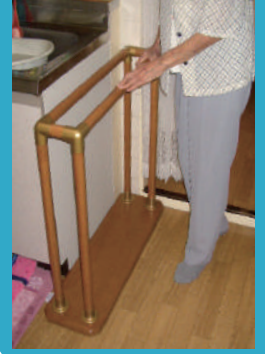






木製置くだけ手すり

スタンダード
ウッドシリーズ

- ①床や壁に穴を開けずに設置可能
- ②置くだけですぐに使用可能
- ③木製の温かい肌触り

- ④用途に合わせて5つのタイプ
- ⑤壁のない広間などでも使用可能

					
商品名	フローリング廊下型	ベッド差し込み型	床立ち上がり型	畳置き型	トイレ型
品番	SBR-05	SBB-05	SBS-05	SBJ-06	SBT-01
使用方法	フローリングの廊下や居室の床に粘着固定マットで固定し、水タンクで重しをします。	安定用鉄板をベッドの下に差し込むなどベッドの重さで固定します。	平らな場所に安定用鉄板を置いて安定させ水タンクで重しをします。	畳などの平らな床に置き、水タンクで重しをします。	トイレの床に粘着固定マットで固定します。
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	805×250×732mm	650×510×662mm	460×535×702mm	1,100×310×684mm	600×200×642mm
本体重量	約7kg	約15kg	約10kg	約10kg	約5.5kg
材料	ラバーウッド集成材 アルミダイカスト	ラバーウッド集成材 アルミダイカスト 安定用鉄板	ラバーウッド集成材 アルミダイカスト 安定用鉄板	ラバーウッド集成材 アルミダイカスト	ラバーウッド集成材 アルミダイカスト
TAISコード	01044-000019	01044-000020	01044-000018	01044-000021	01044-000005
付属品	20L水タンク×2個 タンクカバー×2枚 粘着固定マット×8枚	10L水タンク×2個 タンクカバー×2枚 スペーサー	10L水タンク×1個 タンクカバー×1枚	20L水タンク×3個 タンクカバー×3枚	粘着固定マット×4枚
希望小売価格	74,800円(税込)	96,800円(税込)	77,000円(税込)	94,600円(税込)	41,800円(税込)
原産国	日本製				

お電話でお申し込みの方

06-6170-5161

■受付時間：月～金(平日) 10:30～14:30

ミライズ 手すり

検索

<https://www.merise-inc.com>

福祉介護機器・健康器具の企画・開発・製造・販売

ミライズ株式会社

〒565-0834 大阪府吹田市五月が丘北 1-17-203A

オンラインショップ「フレイルショップ」：<https://frailshop.com>